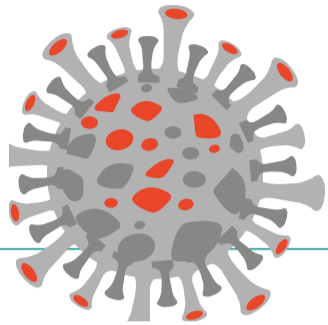

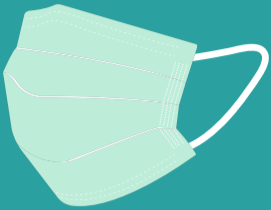



Gemeinsam gegen das Coronavirus

# Masken im Vergleich



			
<b>Eigenschaften</b>	<b>Stoffmaske, Alltagsmaske</b>	<b>Medizinische Gesichtsmaske, OP-Maske</b>	<b>Atemschutzmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske</b>
<b>Norm und Kennzeichnung</b>	Nicht geprüft, keine Kennzeichnung.	Europäische Prüfnorm DIN EN 14683, CE-Kennzeichnung.	1. Europäische Prüfnorm DIN EN 149 2. US-Standard N95, NIOSH-42C FR84 3. Chinesischer Standard KN95, CE mit 4-stelliger Nummer der Prüfstelle.
<b>Funktion</b>	Reduziert die Abgabe von Tröpfchen durch die tragende Person beim Sprechen, Niesen oder Husten.	Schützt vor Tröpfchen durch die tragende Person beim Sprechen, Niesen oder Husten. Bietet geringen Schutz vor Aerosolen.	Schützt vor Tröpfchen und Aerosolen einschließlich Viren. <b>FFP2-Maske ohne Ventil:</b> Atemluft der tragenden Person wird beim Ein- und Ausatmen filtriert. <b>FFP2-Maske mit Ventil:</b> Einatemluft der tragenden Person wird filtriert. Ausatemluft gelangt ungefiltert in die Umgebung.
<b>Eigen- und Fremdschutz</b>	Zum Fremdschutz meist geeignet. Zum Eigenschutz Mindestabstand von 1,5 m einhalten.	Zum Fremdschutz geeignet. Zum Eigenschutz Mindestabstand von 1,5 m einhalten.	<b>Ohne Ventil:</b> Zum Eigen- und Fremdschutz gut geeignet. <b>Mit Ventil:</b> Zum Eigenschutz gut geeignet. <b>Kein Fremdschutz</b> , wenn der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten wird.
<b>Persönliche Schutzausrüstung (PSA)</b>	Gilt nicht als PSA.	Gilt nicht als PSA.	FFP2-Masken gelten als PSA im Sinne des Arbeitsschutzes.
<b>Tragezeitbegrenzung</b>			<b>Ohne Ventil:</b> 75 Minuten mit jeweils anschließender Erholungsdauer von 30 Minuten. Möglich sind fünf Einsätze pro Arbeitsschicht. <b>Mit Ventil:</b> 2 Stunden mit jeweils anschließender Erholungsdauer von 30 Minuten. Möglich sind drei Einsätze pro Arbeitsschicht. Bei leichter Arbeit ist eine Verlängerung der Tragedauer auf 3 Stunden möglich.
<b>Gebrauchsdauer</b>	Nach einem Tragetag bei mindestens 60 °C waschen und vollständig trocknen.	Nicht mehrfach verwenden und über den Hausmüll entsorgen.	Nach einem Arbeitstag über den Hausmüll entsorgen. Im klinischen Bereich ist eine gesonderte Entsorgung vorgesehen.
<b>Weitere Hinweise</b>	Keine weiteren Hinweise.	Keine weiteren Hinweise.	Bei Gesundheitsproblemen ist eine ärztliche Einschätzung nötig. (Arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge, ehemals G26.2, beim AMD der BG BAU möglich.)